


ベッドの隙間に困っていませんか？

【隙間・ずれ防止】 スーキマット SK-7060

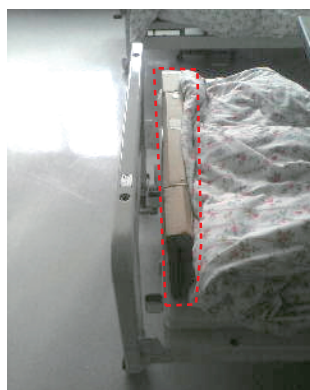

**ずれ落ちる!マットに食い込む!
何かで溝を埋めないと!**

ベッド足板とマットレスの間の隙間。その隙間を埋めなければ、マットレスがずり落ちたり、掛け布団や敷布団がそこへ入り込んでしまったりと患者様の快適なベッド生活を阻害します。その隙間を埋める専用マットが『スーキマット』です。


**段ボールやベッドパッドなどで
対応されていませんか?**

- 見た目がきになる・・・
 - 乾癬などの汚れが気になる・・・
 - シーツの交換時入れにくい・・・
- などがある場合には最適です!

『スーキマット』は独自のクッションにより あらゆる隙間にフィット!

スーキマットの特長

ギャッジアップを行った際に生じる、マットレスとマットレス止めとの隙間を『スーキマット』で埋めることができます。マットレスのズリ落ちや、マットレス止めへの食い込みを防ぎます。患者様のQOL (Quality of Life) のため、様々な開発・研究を行った『スーキマット』です。

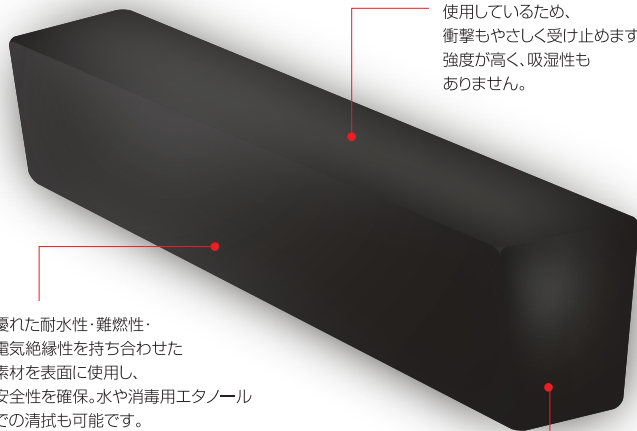

高反発ポリエチレンを使用しているため、衝撃もやさしく受け止めます。強度が高く、吸湿性もありません。

優れた耐水性・難燃性・電気絶縁性を持ち合わせた素材を表面に使用し、安全性を確保。水や消毒用エタノールでの清拭も可能です。

70/60のテーパードで、隙間に設置しやすい設計です。

■カラー



黒



ピンク



白

スーキマットの仕様

外寸	標準型 SK-7060	W730mm×D(上70mm 下60mm)×H110mm(760g)
	エアーマット用 SK-7060H	W730mm×D(上70mm 下60mm)×H150mm(1040g)
内部素材	高反発ポリエチレン	
外カバー素材	塩化ビニール	
色	○白 ●黒 ●ピンク	

※清拭につきましては水又は消毒用エタノール80%以下

スーキマットの使用例



下部が台形状になっているため、上からの挿入・抜き取りも簡単。



ベッドサイズより小さめの設計のため、作業の邪魔になりません。



ベッド清掃後の挿入も簡単。患者様の安定と快適を保つ姿勢の確保が可能です。



お見舞いの方、患者様からの見た目も専用のマットとして認識され、自信を持って設置可能です。ベッドや布団に合わせ、黒・ピンク・白と選択可能です。

(製作・撮影協力施設) 北海道小樽市 医療法人社団 三ツ山病院

お問い合わせ先

製造元

株式会社 **アスカメディカル**

医療機器製造業許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号 TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663

URL: <http://www.asukamedical.co.jp> E-mail: askhm@asukamedical.co.jp