

Order
Made

Only one
Only for you.

システムシンクに内蔵。
シンクとしても浸漬洗浄としても使える

恒温槽

SYSTEM SINK

システムシンク



槽内の温度を保つ

温度管理システム

汚れが落ちやすい

循環機能システム

槽内や配管内を清潔に保つ

自動槽内洗浄機能システム

恒温槽システムシンクで手間を省いて、時間を有効に！

ポイント
1

槽内の温度は 保てていますか？

槽内は設定した温度に制御され、
しっかりと水温を保持します。



ポイント
2

薬液の環流は 適切ですか？

槽内循環により、汚れが落ちやすくな
ります。



ポイント
3

槽内や配管内は 清潔ですか？

作業終了後(薬液交換時)、ボタンひとつで槽内・配管内
の自動洗浄がスタート！ 槽内・配管内をフラッシング！




ポイント
4

スペースを 有効的に使えていますか？

槽内の大きさは、
最小 20L (W 500×D 220×H 200mm)
最大 100L (W 1,100×D 500×H 250mm)
小さい物から大きい物まで幅広く製作可能です。



※ いずれも
サイズ変更
可能です。

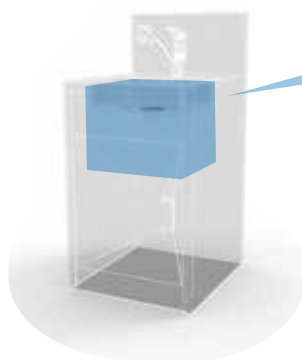

器具が入ったバスケットごと浸漬



下記の必要な設備が準備できる場所であれば
設置可能です。

給水	バルブ止め 20A FL100mm
給湯	バルブ止め 20A FL100mm
排水	50A(VP) FL100mm 立上がり
電源	AC100V 15A 専用供給

恒温槽 + システムシンク



施工例
1

恒温槽
システムシンク

恒温槽
システムシンク



施工例
2


恒温槽
システムシンク



施工例
3

恒温槽
システムシンク

※カタログの仕様は予告なく変更することがあります。

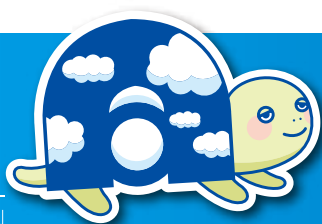

マスコットキャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方はこちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

担当者から直接お返事させていただきます！

製造元

株式会社 アスカメディカル

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号

東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階

askhm@asukamedical.co.jp http://www.asukamedical.co.jp

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225

TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

お問い合わせ先