


本体付属品



●ノズル

用途に応じて
取り替え可能です。

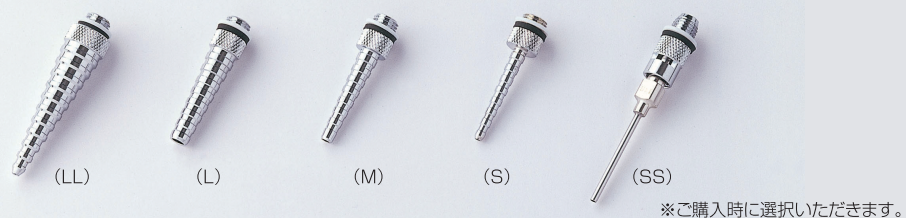

●カートリッジ

簡単に脱着できる
蛇管用と
チューブ用の
2タイプで
用途に応じて
ご使用できます。

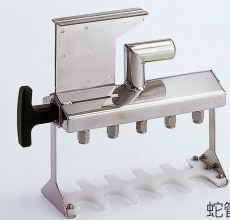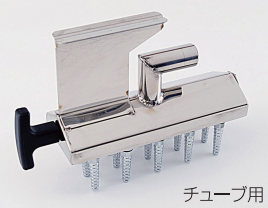



●バスケット

ステンレス製
バスケット



W250×D345×H100mm

仕様・寸法

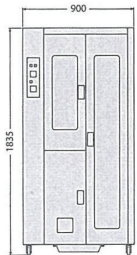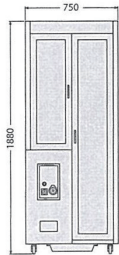製品名	PROSPER プロスパー	
型式	ASK-900V	ASK-750S
ドアタイプ	観音式	観音式
本体寸法	W900×D800×H1,835mm	W750×D450×H1,885mm
庫内寸法	棚側 W260×D290×H830mm カートリッジ側 W300×D290×H1,435mm	棚側 W205×D410×H800mm カートリッジ側 W275×D410×H1,460mm
本体質量	180kg	100kg
標準付属品	カートリッジ(チューブ・蛇管用)×各2 専用バスケット×5	カートリッジ(チューブ・蛇管用)×各1 専用バスケット×3
定格電源	単相100V 20A	単相100V 15A
消費電力	1,080W	669W
使用環境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%	
形状寸法図		

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

製造元


株式会社 アスカメディカル
医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

- 本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10
TEL (06)6939-3011 FAX(06)6939-3225
- 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL (03)5820-5662 FAX(03)5820-5663
- 福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号
TEL (092)292-7971 FAX(092) 292-7972

お問い合わせ先

直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル お問い合わせ 検索

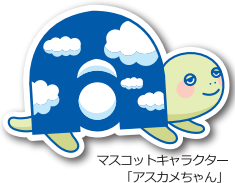


2025.5.H,1000

低温除湿乾燥器

(回路・チューブ乾燥システム)

こんなものが乾燥できます

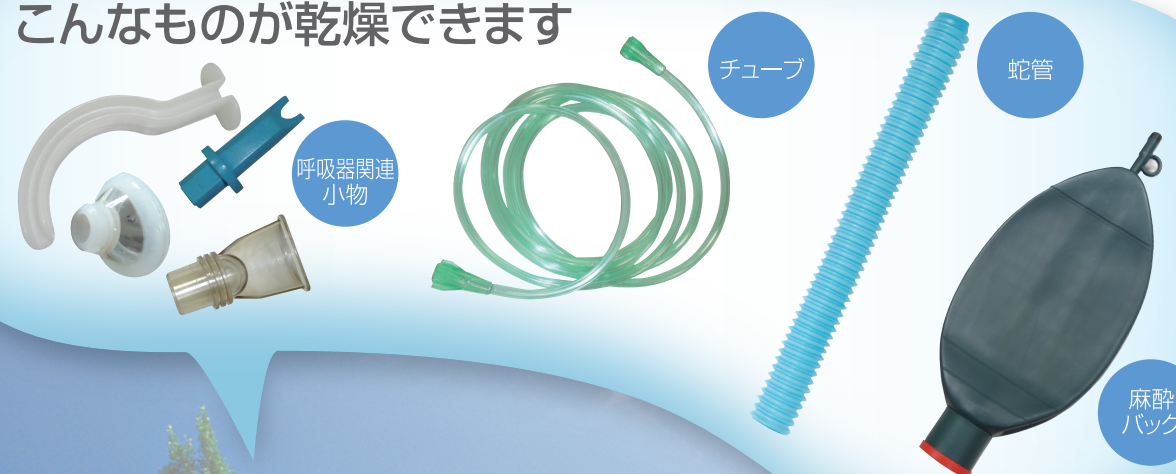

除湿乾燥&加温乾燥器

PROSPER
プロスパー ASK-900V



加温乾燥器

PROSPER
プロスパー ASK-750S

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

除湿と風量の合わせ技

長時間物が湿っていると、洗浄後の状態を維持できない恐れがあります。
除湿力と驚異の風量で素早く乾かすことが大事なんです。

チューブ・蛇管の
中と外を **個別に**
乾燥します！

除湿乾燥と加温乾燥の
切り替えができる乾燥器

PROSPER プロスパー ASK-900V



● 制御パネル

スイッチ1つで乾燥の切り替えが可能！

● 除湿乾燥

40℃の固定方式
乾燥時間任意設定デジタル減算表示

● 加温乾燥

室温より～80℃までの任意設定方式
乾燥時間任意設定デジタル減算表示

特長

1

ツーライン乾燥

中筒・外筒を別々に乾燥します。

特長

2

スーパー除湿

エアコンディショナー搭載
で、湿度を急速除去。

特長

3

驚異の風量

温度を下げずに最大風量。



加温乾燥器

PROSPER

プロスパー ASK-750S

※除湿乾燥はついていません。



● カートリッジ交換方式



カートリッジを使うことで風通し
抜群。



カートリッジ式なので作業台等で
対象物の準備ができ、洗浄器に
もラクラク設置。



チューブ専用カートリッジ(15本用)



蛇管専用カートリッジ(10本用)

驚異の風量

温度を下げずに 最大風量

通常ブロアー(風を送る装置)を最大にする
と、風量上がり温度が下がる悪循環。その結
果温度を上げるため風量を下げて使用しま
すが、弊社独自の改良により最大風量を確保で
きます。

風量 (m³/min)		
ASK-900V	循環	1.3
ASK-750S	カートリッジ部	1.02