

システム乾燥器

SD-410

SD-410P(パススルータイプ)


特長1

100Vの電源で 設置可能

200Vへの電気工事不要!!

特長2

DIN規格 バスケット対応

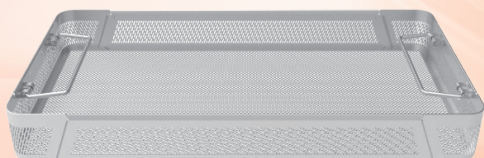

棚板1枚につき、DINバスケット2枚設置可能。付属の棚板3枚を設置すれば、DINバスケット6枚設置可能。

棚板をオプションで備えて頂ければ、最大で20枚のDINバスケットを収納可能。

特長3

希望温度や 時間に設定可能

デジタル温度調節器とダイヤル式のタイマー設定方式で簡単設定。



仕様/寸法

型 式		SD-410/SD410P(パススルータイプ)
方 式		自然対流
使用温度範囲		室温+10~120℃
内 装		SUS304
温度調節器		デジタル表示PID制御
タイマー		ダイヤル式ソリッドステートタイマー
ヒーター		SUS304 シーズヒーター 1,450W
センサー		K熱電対
排気口		φ30×2ヶ
安全装置		独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー、自己診断機能
内 寸 法		W620×D620×H1,100(mm)
外 形 寸 法		W720×D720×H1,800(mm)
内 容 積		400L
扉		パススルー / 観音開き式
観 測 窓		3.0t×巾150×高880(mm) 2重ガラス
棚 板		パンチングメタル 3枚
棚 受 ビ ッ チ		30mm段
発熱量/放熱量		1,243(kcal) / 2,828(kcal)
電 源		AC100V 1,450W
製 品 重 量		160kg

注) +-温度が生じるため熱に弱いものは入れないでください。



株式
会社

アスカメディカル

TEL(06)6939-3011(代)

E-mail: askhm@asukamedical.co.jp

直接質問
したい方は
こちらから

アスカメディカル 問い合わせ

検 索