




内腔器具専用乾燥器



ASK-1200HC

温風と冷風で
「ハドレー循環」を起こし
短時間での完全乾燥を実現。

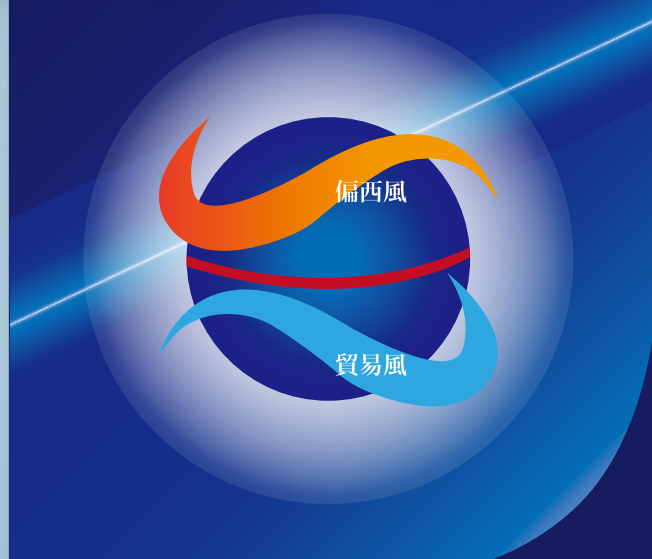

装着簡単！
内部への直接送風で
滅菌不良解消！

同時に8本まで
乾燥可能！



内腔器具専用アダプター



内部送風用
アタッチメントへ装着



内腔器具をしっかり固定




乾燥器へ簡単固定

水浸漬状態から 75℃ 約30分 で 完全乾燥！

新発想

温風 冷風 ブロー & 圧縮エアで乾燥促進!

大型ブロー・コンプレッサー搭載! ^{ダブル}W効果!

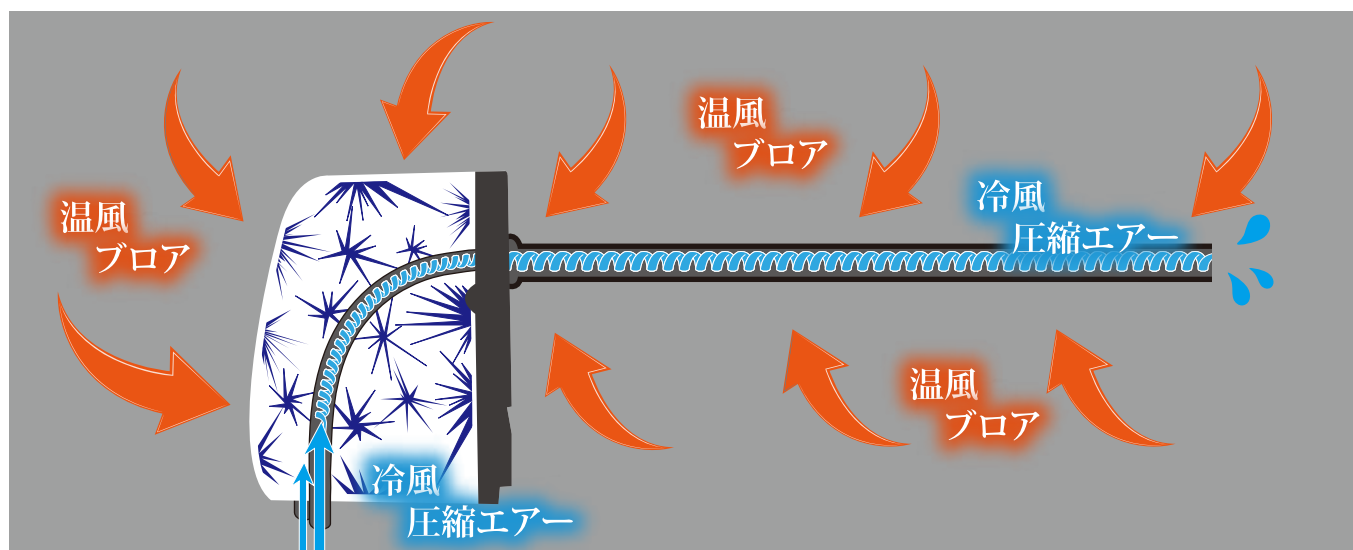

複雑な内腔構造に対応



ハンドピーストレー



ラパロ鉗子トレー

滅菌不良の心配が不要に。

■仕様/寸法

製 品 名	内腔器具専用乾燥器 ハドレー	材 質	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 庫内#400
型 式	ASK-1200HC	付 属 品	内腔器具専用アダプター・接続チューブ × 8本
本 体 寸 法	1200W×700D×1845H mm	オ プ シ ョ ン	ハンドピーストレー・ラパロ鉗子トレー
庫 内 寸 法	780W×400D×850H mm	電 源 / 消 費 電 力	AC200V 20A / 5.5KW
開 口 部	780W×850H mm	発 熱 量 / 放 熱 量	4745kcal / 1375kcal
本 体 質 量	270kg	使 用 環 境	周囲温度 10~40℃ 相対湿度 30~85%

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

製造元



株式会社 アスカメディカル

医療機器製造業許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210


- 本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
- 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663
E-mail:askhm@asukamedical.co.jp
URL:http://www.asukamedical.co.jp

直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル 問い合わせ

検 索

お問い合わせ先

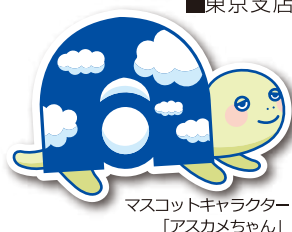

マスコットキャラクター
「アスカメちゃん」