

低温乾燥器

PROSPER


プロスパー ASK-1200FT



仕様・寸法


製品名	PROSPER プロスパー
型式	ASK-1200FT
ドアタイプ	折りたたみ観音式
本体寸法	W1,200×D800×H1,895mm
庫内寸法	棚側 W385×D495×H880mm カートリッジ側 W475×D495×H1,445mm
本体質量	290kg
標準付属品	カートリッジ(チューブ・蛇管用)×各3
定格電源	単相100V 20A
消費電力	1,470W
使用環境	周囲温度20～40℃ 相対湿度30～85%

形状寸法図

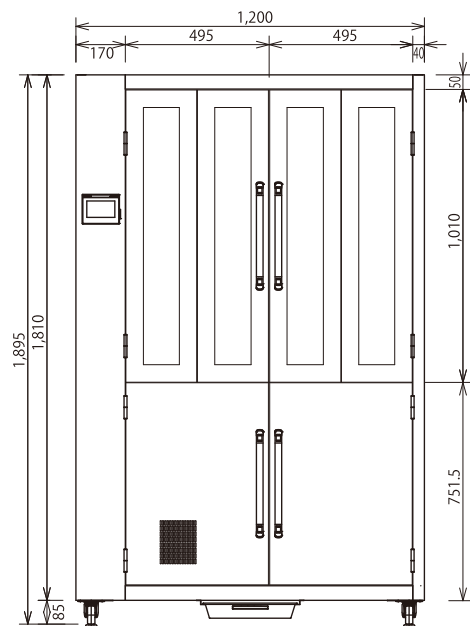

除湿機能

40℃固定で湿気(水分)を吸い取る
機材に優しい機能です。

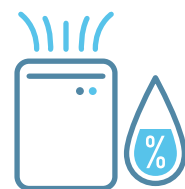


※イメージです。

別売品(オプション)

■ カートリッジ



■ 棚板(L字アングル付)

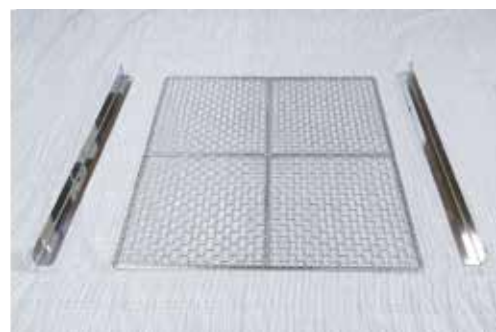

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も
Webにて開催中!



Follow me /
YouTube Instagram

製造元



株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10 TEL(06) 6939-3011 FAX(06) 6939-3225
東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL(03) 5820-5662 FAX(03) 5820-5663
福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号 TEL(092) 292-7971 FAX(092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

2025.05.H.1000

お問い合わせ先

低温乾燥器

PROSPER

プロスパー ASK-1200FT



ASUKAMEDICAL CO.,LTD.



お客様の声をカタチにした結果 こうなりました

低温乾燥器 **PROSPER** プロスパー ASK-1200FT



\\ タッチパネルに変更 /



01
POINT

タッチパネルで見やすく！

- ・タイマー連続運転の選択可能
- ・任意で2つのモードを設定可能
- ・お知らせ機能搭載



02
POINT

DINバスケットが入られる！



Before

従来品／当社の独自バスケット



After

専用バスケット仕様から
\\ DINバスケット仕様に変更 /
DIN規格バスケット／W480×D250×H50mmまで

運用に幅が
できました！

Feature

DINバスケット
15枚以上
積載可能！


03
POINT

全段スライド棚で運用に幅を！

スライド段を3段から
\\ 5段に変更 /



Before

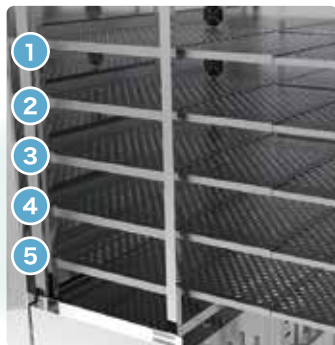

After

Feature

スライド棚
3段 ▶ **5**段
※1200V ※1200FT

風速アップ

※社内検証による。作業環境などにより、変動の可能性あり。

1200V : 約 4.5m/s
1200FT : 約 6.5m/s

04
POINT

カートリッジが持ちやすく！



Before



After

\\ T字からL字に変更 /

手持ちの形状を変更。持ちやすくなり効率アップ。

05
POINT

庫内容量 UP！

製品改良の結果、
奥行を約16cm
広げることに
成功。



Feature


庫内寸法
約 1.5 倍
※当社 1200V と比較

06
POINT

チューブ、蛇管類の
乾燥がなければ、
追加の棚板で
バスケットの
積載量をUP！



※可変の棚板（L型アングル付）はオプション

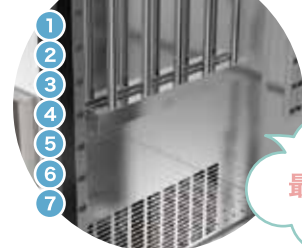

追加オプションで
最大7枚棚板を
増やせます

可変棚で
収納力
アップ！

07
POINT

呼吸器バッグ類の乾燥もここでOK！



内腔から、
風をあて乾かすことで
効率アップ！