

省スペースなのに大容量

多機能型乾燥器

Airix⁺

エアリクスプラス ASK-640CT



・DIN バスケット

・チューブ



・手術支援ロボット




+

×

÷

・蛇管

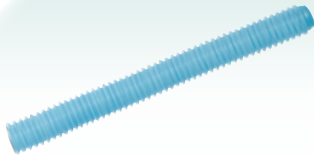

組み合わせ
自由

必要なものを
必要な分だけ



Feature.1

スライド式で
出し入れ
簡単!

スライド棚で
運用に幅を!

Feature.2

任意の温度で
2モード作成

高温モードか低温モードの
設定が可能。

Feature.3

運転モードの
選択が可能!

タイマー運転か連続運転の
設定が可能。

Airix+

エアリクスプラス ASK-640CT

多機能型乾燥器

多彩なオプションから“あなただけ”を選ぶ

きっちり乾燥、きっちり保管

Option オプション

棚板専用ユニット

■専用スライド棚板



スライド式なので、用途に応じて伸縮

DIN バスケット
10枚以上乾燥

Option オプション

多機能着脱式カートリッジ

■ロボット用 インストゥルメント カートリッジ

インストゥルメントの内腔に
直接送風で乾燥時間を短縮

最大
8本



Point

3種のカートリッジを
つけ替え可能な
スライドレール搭載

最大2つのカートリッジが
セット可能!

■チューブ用カートリッジ

■蛇管用カートリッジ

最大
30本





最大
20本



取外し式なので、
手元でラクラク作業

Point

運転モードも、2モードから選択可能!

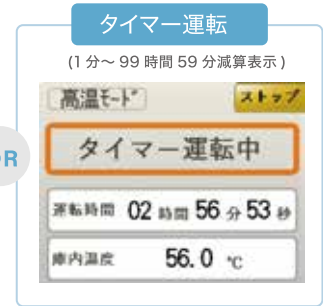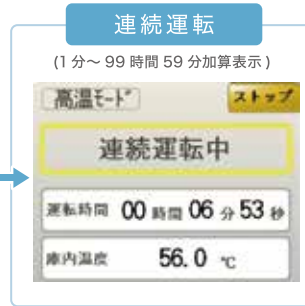

仕様・寸法

製品名	多機能型乾燥器 Airix+ (エアリクスプラス)
型式	ASK-640CT
本体外寸	W640×D800×H1,950mm
庫内寸法	W580×D550×H1,200mm
標準付属品	専用スライド棚板×3
定格電源	単相100V 15A
使用環境	周囲温度20~40℃ 相対湿度30~85%



※画面はモデル機のものとなります。予告なく変更されることがあります。 ※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。



マスコット
キャラクター
「アスカメちゃん」

「直接質問したい!」という方は、こちらから

アスカメディカル お問い合わせ

検索

自社展示会も

Webにて開催中!



Follow me



製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造許可証 27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

本社・工場/〒536-0008 大阪市城東区関目2-12-10

TEL (06) 6939-3011 FAX (06) 6939-3225

東京支店/〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階 TEL (03) 5820-5662 FAX (03) 5820-5663

福岡営業所/〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア3号 TEL (092) 292-7971 FAX (092) 292-7972

askhm@asukamedical.co.jp https://asukamedical.co.jp

お問い合わせ先